

STABILIZED IGM REAGENT FOR IMMUNOASSAY

Publication number: JP9127114

Publication date: 1997-05-16

Inventor: YOSHIMURA TORU

Applicant: DAINABOT CO LTD

Classification:

- International: G01N33/53; G01N33/531; G01N33/576; G01N33/53;
G01N33/531; G01N33/576; (IPC1-7): G01N33/531;
G01N33/53; G01N33/576

- European:

Application number: JP19950306354 19951101

Priority number(s): JP19950306354 19951101

Report a data error here

Abstract of JP9127114

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an IgM reagent stable over a long term and useful as an immunoassay reagent. **SOLUTION:** Regarding an IgM reagent used in the immunoassay, IgM or IgM contained water solution stabilized with bovine serum albumin liquid is used as an IgM reagent. Regarding the method for measuring a singular IgM antibody for an object antibody in a specimen in an immunological way, using an anti-human IgM antibody reagent, in particular, a reagent at least made of IgM contained water solution stabilized with bovine serum albumin liquid is used to dilute the specimen, thereby providing a more accurate singular IgM antibody measurement method. Also, regarding a measurement system using a marked IgM antibody obtained by marking the IgM antibody with a marker, the marker, IgM antibody solution is stabilized at least by use of bovine serum albumin liquid, thereby providing a more stable method for measuring an antigen contained in a specimen.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

特開平9-127114

(43) 公開日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int. Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 N 33/531			G 0 1 N 33/531	B
33/53			33/53	N
33/576			33/576	A

審査請求 未請求 請求項の数13 F D (全 11 頁)



(21) 出願番号	特願平7-306354	(71) 出願人	000109015 ダイナボット株式会社 東京都港区六本木1-9-9 六本木フ ーストビル
(22) 出願日	平成7年(1995)11月1日	(72) 発明者	吉村 徹 千葉県松戸市松台34番地 ダイナボット 株式会社総合研究所内
		(74) 代理人	弁理士 水野 昭宣

(54) 【発明の名称】 免疫学的測定用安定化 I g M 試薬

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 長い期間安定であり、免疫測定試薬として有用な I g M 試薬を得る。

【解決手段】 免疫学的測定法において使用するための I g M 試薬において、牛血清アルブミン液で安定化された I g M または I g M 含有水溶液を該 I g M 試薬として用いる。特に、抗ヒト I g M 抗体試薬を使用して被検試料中の対象抗原に対する特異的 I g M 抗体を免疫学的に測定する方法において、少なくとも牛血清アルブミン液で安定化された I g M 含有水溶液からなる試薬により、被検試料を希釈することによって、より正確な特異的 I g M 抗体測定方法が提供できる。さらに、I g M 抗体を標識剤で標識して得られた標識 I g M 抗体を用いた抗原の測定系において、標識 I g M 抗体溶液を少なくとも牛血清アルブミン液で安定化することにより、より安定な被検試料中の抗原の測定方法を提供できる。

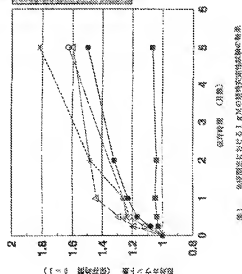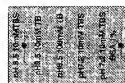

【特許請求の範囲】

【請求項1】 免疫学的測定法において使用するための1gM試薬において、牛血清アルブミン液で安定化された1gMまたは1gM含有水溶液であることを特徴とする免疫学的測定用1gM試薬。

【請求項2】 安定化された1gMまたは1gM含有水溶液中に存在する牛血清アルブミンの量が約0.05～約1.0重量/容量(w/v)の量である請求項1記載の免疫学的測定用1gM試薬。

【請求項3】 安定化された1gMまたは1gM含有水溶液中に存在する牛血清アルブミンの量が約0.75～約2.5重量/容量(w/v)の量である請求項1記載の免疫学的測定用1gM試薬。

【請求項4】 1gM試薬が標識剤で標識化されている標識1gMまたは標識1gM含有水溶液であることを特徴とする請求項1～3のいずれか一記載の免疫学的測定用1gM試薬。

【請求項5】 標識が、放射性同位体、酵素、発光性物質、蛍光性物質、及びアプタインから成る群から選ばれたものであることを特徴とする請求項4記載の免疫学的測定用1gM試薬。

【請求項6】 標識化されている1gM試薬がサンドイッチ・アッセイ法による抗原測定系に使用するものであることを特徴とする請求項4又は5記載の免疫学的測定用1gM試薬。

【請求項7】 抗ヒト1gM抗体試薬を使用して被検試料中の対象抗原に対する特異的1gM抗体を免疫学的に測定する方法において、少なくとも牛血清アルブミン液で安定化されたヒト1gMまたはヒト1gM含有水溶液が用いられる試薬により、被検試料を希釈することを特徴とする特異的1gM抗体測定方法。

【請求項8】 特異的1gM抗体がHAVに対する1gM抗体又はHBcに対する1gM抗体である請求項7記載の特異的1gM抗体の測定法。

【請求項9】 (1) 測定対象試料を必要に応じ緩衝剤、希釈液又は希釈剤の水溶液で希釈し、つぎに少なくとも牛血清アルブミン液で安定化された1gMまたは1gM含有水溶液からなる試薬により試料を希釈した後、試料中の測定対象特異的1gM抗体を、抗ヒト1gM抗体結合固相担体に反応させて試料中の1gM抗体を固相担体と免疫学的に反応させ、

(2) (a) 得られた反応生成物に特定の抗原試薬を免疫学的に反応させ、さらに抗原試薬に対する抗体を標識剤で標識した標識抗体を免疫学的に反応させるか、又は(b) 得られた反応生成物に特定の抗原試薬を標識剤で標識した標識抗体を免疫学的に反応させることを特徴とする請求項7又は8記載の特異的1gM抗体の測定法。

【請求項10】 対象抗原を含有する被検試料に第1の抗体と第2の抗体を接触させることにより前記対象抗原と前記第1の抗体と前記第2の抗体とからなる複合体を

形成させる工程を含む免疫学的測定方法において、前記第1の抗体と前記第2の抗体のいずれか一方として、標識剤で標識化された1gM試薬を用い、該方法において少なくとも牛血清アルブミン液で該標識1gM試薬を安定化することを特徴とする方法。

【請求項11】 前記被検試料を、当該被検試料中の対象抗原に対する固相担体に結合されている第1抗体(固相化抗体)及び標識化されている第2抗体(標識抗体)とに接触させ、当該第1抗体と当該抗原と当該第2抗体との複合体を形成させ、当該複合体における標識抗体又は未反応標識抗体のいずれかを測定することを特徴とする請求項10記載の方法。

【請求項12】 (1) (a) 対象抗原を含有する被検試料に固相担体に結合されている第1抗体を接触させることにより前記対象抗原を前記第1の固相化抗体に結合させ、必要に応じ両相を洗浄処理した後少なくとも牛血清アルブミン液で安定化されている標識1gMである第2抗体を接触させることにより免疫複合体を形成させるか、あるいは(b) 対象抗原を含有する被検試料に標識され且つ安定化された1gMである第2抗体を接触させることにより前記対象抗原を前記第2の標識抗体に結合させ、次に固相担体に結合されている第1抗体を接触させることにより免疫複合体を形成させる、(1) 必要に応じ両相を洗浄処理して、当該複合体における標識抗体又は未反応標識抗体のいずれかを測定することを特徴とする請求項10又は11記載の方法。

【請求項13】 測定対象試料が、全血、血清、または血漿である請求項7～12のいずれか一記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、免疫学的測定試薬として有用な安定化1gM試薬を提供する。特に、1gMまたは1gM含有水溶液を牛血清アルブミン液で安定化すると、その安定化1gMまたは1gM含有水溶液は抗ヒト1gM抗体試薬を使用して被検試料中の対象抗原に対する特異的1gM抗体、例えばA型肝炎ウイルス(Hepatitis A virus: HAV)感染の診断などにおける免疫学的に測定する方法において、試薬として有用である。またいわゆるサンドイッチ・アッセイ法による抗原測定系において、標識剤で標識化された1gM試薬を用いる場合、牛血清アルブミン液で該標識化された1gM試薬を安定化した免疫学的測定方法にも関する。

【0002】

【従来技術及び解決すべき課題】免疫学的測定法は、人の臨床における検査や病気の診断に広く利用される他、動物についてもその臨床検査や病気の診断、さらにはその他の広い範囲の測定対象物の分析、測定、定量、検出などの分野において応用されている。この免疫学的測定法は、抗原とその抗原に対する抗体との間の抗原抗体反

応を利用するものである。免疫グロブリン、すなわち抗体は、 1 gM 、 1 gG 、 1 gA 、 1 gD 及び 1 gE といったアイソタイプクラスに分類できることが知られており、そのうち 1 gG はさらに 1 gG_1 、 1 gG_2 及び 1 gG_3 といったサブクラスに分類される。免疫グロブリンのうち 1 gM は最も大きな分子量を有し、約 $900,000$ という 1 gG に比して、5倍以上の大きさで、一般的には 1 gG のペンタマーに相当すると考えられている。つまり 1 gM は一般に 10 個の重鎖と 10 個の軽鎖と 1 本のJ鎖とからなり、抗体結合部位が 10 個で、さらにグルコサミンオリゴ糖の結合した糖タンパク質である。 1 gM は免疫応答において最も初期に生成されてくる抗体と考えられている。ペンタマーである 1 gM は、抗原と結合したとき 1 gG クラス抗体より効率よく動物の補体系を刺激することから、赤血球凝集反応、溶血反応、溶菌反応、中和反応、抗原との凝集反応などを起こすことが知られている。

【0003】この 1 gM は、多価型に対する特異性が高いことから、最近では癌関連抗原標識に特異的な抗体として、癌診断に利用することが試みられている。こうした 1 gM は、例えば酵素標識し、酵素免疫測定法に応用しようとするとき 1 gM 抗体が非常に大きな重合体となり、測定時の非特異的吸着などが高くなり、測定の再現性に問題があったり、感度も低下することが知られている。一方上記したように 1 gM は非常に低濃度でも細菌抗原やウイルス抗原などと反応するというようなその大きな抗体価を利用して、免疫測定試薬として利用することが図られている。特に急性期において生体内の免疫反応により生じる特異的 1 gM 抗体を測定することは、例えば、ウイルス感染、病前感染などの初期感染の診断に用いられて有用であることから注目されている。この 1 gM 測定を利用する免疫学的測定法の代表的なものとしては、 1 gM 抗体増発測定法が挙げられ、例えば、A型肝炎ウイルス（Hepatitis A virus：HAV）感染の診断、B型肝炎ウイルスコア抗原（Hepatitis B virus core antigen：HBc）、麻疹、麻疹、ムンプスなどの診断などに利用されている。

【0004】この 1 gM 測定を利用する免疫学的測定法においては、通常流ヒト 1 gM 抗体試薬を使用して被検試料中の対象抗原に対する特異的 1 gM 抗体を免疫学的に測定することが行われているが、この時被検試料を少なくとも 1 gM または 1 gM 含有水溶液により希釈することにより、被検試料の必要な測定範囲を簡単に設定でき、より早い時期で特異的な 1 gM 、例えば、HAV関連抗体を検出したり、前希釈の希釈倍率を低減せしめてより広範囲の測定を可能にする自動化された測定系に適した測定方法が見出されている。しかしながら、試薬として 1 gM 自体を利用する場合、その 1 gM が不安定であるという問題があった。また、 1 gM は多価抗体であ

ることから、非常に低濃度でも細菌やウイルスといった抗原や赤血球と反応し、凝集を起こす働きがあることが観察されている。さらに、 1 gM は 1 gG などと比較して巨大な分子であるためか、凝集する傾向があり、一般に精製された形態で安定化することとは比較的に困難とされている。

【0005】特に 1 gM 自体を試薬として用い、例えば抗体試料の希釈を行うと、 1 gM は希薄溶液で不安定で、希薄溶液として使用しようとするときに極めて容易に凝集して、測定に悪影響を与えるという問題があった。このように 1 gM は一般的に非常に不安定で、様々な物理的あるいは化学的ストレスによって容易に凝集沈殿してしまい、試薬として使用するのには困難であった。こうした不安定な 1 gM は、濃縮液あるいは乾燥粉末として保存し、使用直前に希釈せざるを得ないが、これでは測定の度毎に特定濃度の 1 gM 希釈液を調整する必要があるなど、さらに長期間の保存が困難などの問題があった。

【0006】【課題を解決するための手段】本発明者は、上記したような問題のない、そしてたとえ希釈溶液としても長い期間安定であり、免疫測定試薬として有用な、特にHAV関連抗体を検出したりする場合被検試料の必要な測定範囲を簡単に設定できかつ特異的な 1 gM 抗体を検出する前希釈の希釈倍率を低減せしめてより広範囲の測定を可能にする自動化された測定系に有用な 1 gM 試薬を得るべく、鋭意研究を行った結果、簡単な方法によりそれらの問題を解決しうることを見出し、本発明を完成した。

【0007】本発明は、免疫学的測定法において使用するための 1 gM 試薬において、安定化剤として牛血清アルブミン液を配合することにより、安定化された 1 gM または 1 gM 含有水溶液が得られ、この安定化 1 gM または 1 gM 含有水溶液を該 1 gM 試薬として用いることを特徴とする免疫学的測定用 1 gM 試薬を提供するものである。またより具体的な態様では、本発明は抗ヒト 1 gM 抗体試薬を使用し、被検試料中の対象抗原に対する特異的 1 gM 抗体を免疫学的に測定する方法において、少なくとも牛血清アルブミン液で安定化された 1 gM または 1 gM 含有水溶液からなる試薬により被検試料を希釈することを特徴とする特異的 1 gM 抗体測定方法を提供するものである。

【0008】本発明は、さらに被検試料中の抗原を免疫学的に測定する方法において、そこで使用する標準液で標準化して得られた標準 1 gM 抗体試薬を牛血清アルブミン液でもって安定化することを特徴とする免疫学的測定方法及びそれらに用いる試薬を提供する。より具体的な態様では、対象抗原を含有する被検試料に第1の抗体と第2の抗体を接触させることにより前記対象抗原と前記第1の抗体と前記第2の抗体とからなる複合体を形成さ

せる工程を含む免疫学的測定方法において、前記第1の抗体と前記第2の抗体のいずれか一方が、1 g Mまたは1 g M含有水溶液であつた当該1 g Mが標識剤で標識化されたもので、該測定系において該1 g Mは牛血清アルブミン液でもって安定化されていることを特徴とする方法が提供される。例えば、サンドイッチ・アッセイ法による抗原測定系では、標識剤で標識化して得られた標識1 g M抗体試薬は牛血清アルブミン液を測定系に添加することにより安定化されうるし、あるいは牛血清アルブミン液でもって安定化されている試薬として該標識1 g M抗体試薬を該測定系で用いることができる。

【0009】

【発明の実施の態様】1 g Mを含む試薬溶液としては、特に限定されないが、動物の血清、例えばヒト血清、ハイブリドーマを移植した動物の腹水液、ハイブリドーマ及びリンパ球の培養液、遺伝子工学的に1 g M様抗体を分泌せしめられた培養液、あるいは精製された1 g Mなどが挙げられる。また1 g Mの由来としては特に限定されないが、例えばヒト、マウス、ラット、ウサギ、ヤギ、ヒツジ、ウマ、ウナギなどの動物が挙げられ、抗血清、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、それらの混合物などを用いることができる。

【0010】こうした1 g Mを安定化するための試薬としては、牛血清アルブミン（BSA）液が挙げられる。BSAは、1 g M溶液中の量が約0.01～約25%重量/容量（w/v）の量で添加することができ、好ましくは約0.01～約20%重量/容量（w/v）の量、より好ましくは約0.05～約10%重量/容量（w/v）の量、さらに好ましくは約0.2～約5.0%重量/容量（w/v）の量、特に好ましくは約0.5～約3.0%重量/容量（w/v）の量となるように添加することができるが、実質的に使用に十分な安定性が確保できかつ測定に悪影響を与えない範囲で任意に選ぶことができる。またBSAは、1 g M溶液中の量が約0.75～約2.5%重量/容量（w/v）の量となるように添加することができる。こうした安定化されている1 g Mは、さらに必要に応じ標識を施すこともできる。例えば放射性ヨウ素などの放射性同位体などで標識することでも、ペオキシゲンダーゼ、アルカリフォスファターゼ、ガラクトシダーゼなどの酵素、アクリジニウム塩、フルオロセシンなどの発光あるいは蛍光標識など、さらにビオチンなどで標識することもできる。こうした安定化された1 g Mは、さらに通常の免疫学的測定法に用いることができる。免疫学的測定法としては、使用する標識、測定手法などに従い種々の方法が知られ、例えば放射免疫測定法、酵素免疫測定法、蛍光免疫測定法、化学発光免疫測定法、凝集免疫測定法、サンドイッチ法、競合法などが挙げられる。

【0011】より具体的な態様においては、本発明は、試料を一員級調剤、希釈液又は希釈剤などの水溶液で稀

分か希釈し、つぎに試料を少なくとも牛血清アルブミン液で安定化された1 g Mまたは1 g M含有水溶液により希釈した後、試料中の抗ウイルス特異的1 g M抗体などの特定の抗原に特異性をもつ1 g M抗体を、抗ヒト1 g M抗体で被覆した固相抗体などと反応させて試料中の1 g M抗体を固相抗体ヒト1 g M抗体と免疫学的に反応させ、（a）つぎにウイルスなどの特定の抗原試薬を免疫学的に反応させ、得られた反応生成物に化学発光標識抗ウイルス抗体などの標識抗体を免疫学的に反応させるか、または（b）ウイルスなどの特定の抗原試薬を標識剤で標識した標識抗原を免疫学的に反応させることを特徴とする特異的1 g M抗体の測定法及びその測定法に用いる試薬が提供される。また別の具体的な態様においては、本発明は、対象抗原を含有する被検試料に第1の抗体と第2の抗体を接触させることにより前記対象抗原と前記第1の抗体と前記第2の抗体とからなる複合体を形成させる工程を含む免疫学的測定方法において、前記第1の抗体と前記第2の抗体のいずれか一方として、標識剤で標識化された1 g M試薬を用い、該方法において少なくとも牛血清アルブミン液で該標識1 g M試薬を安定化することを特徴とする方法を提供するものである。

【0012】より好ましくは該方法は、前記被検試料を当該被検試料中の対象抗原に対する固相抗体に結合されている第1抗体（固相抗体）及び標識されている第2抗体（標識1 g M抗体）とに接触させ、当該固相化第1抗体と当該抗原と当該標識1 g M第2抗体との複合体を形成させ、当該複合体を未反応標識抗体から分離した後、当該複合体における標識抗体又は未反応標識抗体のいずれかを測定する測定系において、標識1 g M抗体試薬を牛血清アルブミン液をその測定系に共存させることにより安定化せしめることを特徴とするものである。被検試料中の対象抗原と各抗体との接触は、同時に当該固相化第1抗体と当該標識1 g M第2抗体とを当該被検試料中の対象抗原に接触させるものでもあってもよいし、あるいは先ず該被検試料中の対象抗原と固相化第1抗体とを接触させ、必要に応じ、洗浄処理を加えた後、当該標識1 g M第2抗体を接触させるものでもあってもよいし、さらには先ず該被検試料中の対象抗原と標識1 g M第2抗体とを接触させ、次に当該固相化第1抗体を接触させるものでもあってもよい。典型的にはサンドイッチ法として広く知られた種々の手法を適用することができる。例えば、サンドイッチ・アッセイ法による抗原測定系では、好ましくは標識1 g M抗体は牛血清アルブミン液を測定系に添加することにより安定化されうるし、あるいは牛血清アルブミン液でもって安定化されている標識1 g M抗体試薬として該測定系で用いることができる。

【0013】特に好ましい測定系の例としては、HAY感染の急性性に生ずる、1 g M型の抗HAY抗体を測定することによりA型肝炎の感染を診断する方法が挙げられる。この1 g M型の抗HAY抗体を特異的に測定する

系では、 μ -鎖特異性の抗ヒトIgM抗体で被覆した固相、例えば下記に示すような固相担体を、測定試料と反応させ、次にHAV抗原試薬と反応させ、最後に標識抗HAV抗体と反応させるというように順次反応させることにより行われる。A型肝炎ウイルス(HAV)は、1973年フェインストン(Feinstein)等によりA型肝炎急性期患者の便材料のうちに発見され、1977年には尖峰感染症センター肝組織における増殖の報告がされておち、1979年には初代マーマーセット肝細胞及びアカガザル胎児肝細胞での増殖が報告されて以来、HAVを培養細胞系では初代及び殊化アフリカミドリザル腎細胞、ヒト二倍体細胞などにおいて増殖せしめることが報告されている。

【0014】ところで、現在日本では、A型肝炎ウイルス感染の発生は減少しているものの、若年層を中心に抗HAV抗体陽性者が増加するのに対して、一方では高齢者にはその陽性者が多く分布するという状況が、そのHAV感染を研究意味でも、正確かつ迅速なHAV感染の有無を検出することが求められている。HAVは糞便などによる経口感染をその主な伝播経路とするため、環境衛生の不備な地域での感染の危険は大きく、最近では海外渡航の機会も増加し、こうしてHAV感染の検査が、近視者間、従業員者間などで感染を防ぐ意味でも重要視されている。

【0015】この急性期のHAV感染の検出のためには、HAV感染に伴って生体内の強い免疫反応により患者の血液中に出現する抗HAV抗体、特にHAVに特異的なIgM抗体を検出して行われており、この抗HAV(IgM)抗体と免疫学的に反応性を有するHAV抗原を試薬として用いる次のようなIgM抗体捕捉測定法が開発されている。代表的なIgM抗体捕捉測定法にしたがう急性A型肝炎の感染診断法は、IgM抗体の μ -鎖に特異性をもつ抗ヒトIgM抗体を使用し、その抗ヒトIgM抗体(μ -鎖特異抗体)で被覆した固相、例えば下記に示すような固相担体を、測定試料と反応させ、次にHAV抗原試薬と反応させ、最後に標識抗HAV抗体と反応させるというように順次反応させることにより行われる。

【0016】ところが、このような急性期においては血液、血清、血漿などの被検試料中の抗HAV(IgM)抗体などの測定すべき特異的なIgM及び総IgMの濃度は極めて低く、一般には、血液中の総IgM量は通常約0.4~2mg/ml存在していることが知られているが、上記した第一反応での抗ヒトIgM抗体で被覆した固相の抗体量が充分でない場合が起こるので、被検試料を前希釈、例えば、高倍率の前希釈を行うことが必要であるという問題がある。従来は、緩衝水溶液、生理食塩水溶液などで被検試料を前希釈していた。こうすると総IgM抗体の量を減らすことになるが、総IgM抗体量に対する特異的なIgM量の比率を減らすことはできな

い。そのため、必要な測定範囲を得ることが困難であるという問題がある。また自動化された測定系においては、希釈倍率が制限されるという問題があり、測定範囲が限定されてしまうという問題があった。これを解決する手段として、例えば試料をヒトIgM含有フракシオン、精製ヒトIgMなどの水溶液を添加して、試料中のIgM層に影響されることなく、目的の抗原に特異的なIgM抗体を測定できるようにする。

【0017】被検試料をIgM含有溶液で希釈する場合、前もって生理食塩水などで被検試料を適宜希釈してもよい。さらにヒトIgM溶液の添加処理により、より広範囲の測定を達成することもできし、測定試料製法の手間、例えば試料濃度の調整などの測定範囲設定が簡易に行うことができるようになり、自動化免疫測定系における適用が容易になる。しかし、IgM溶液は不安定なため試薬としてより安定なIgM溶液が好ましい。本発明では、牛血清アルブミン液で安定化されたヒトIgM含有フракシオン、牛血清アルブミン液で安定化された精製ヒトIgMなどの水溶液を添加しても同様な利点を得られることを認識してなされている。こうして上記したように特異的なIgM、例えば、HAV関連抗体を検出したり、前希釈の希釈倍率を低減せしめてより広範囲の測定を可能にし、例えば、A型肝炎患者などの高濃度領域における確実な測定法が可能になる。

【0018】本発明に従ったIgM型の抗HAV抗体を特異的に測定する系で用いられるHAV抗原試薬は、インビトロの細胞培養法で得られたウイルス抗原を用いている。それは感染細胞を単離化して得られた細胞ライゼートから分離されたHAV抽出物あるいはそれから誘導されたものが挙げられる。そのHAV抽出物は、例えばアフリカミドリザル腎培養細胞、ヒト肝臓癌細胞系PLC/PRF/5、Hep.G2などのHAV感染細胞であって培養しているもので、さらに好ましくは大量にHAVを産生しうるセルライン細胞を、公知の生育培地、例えばイーグル最小必須培地(Eagle's MEM)、ダルベコ最小必須培地(Dulbecco's MEM)、PRMI-1640(Gibco社)、Eagle's MEM、N-2(ニヒロキシエチル)ビペラジン-N'- γ -(γ -エタノールホスホン酸)(HEPES)緩衝液添加イーグルMEM、リン酸緩衝液L-15-a培地、ハンクス緩衝液(balanced salt solution)などの生育培地で、必要に応じてウシ胎児血清(FCS)、ペニシリン、ストレプトマイシンなどの抗生物質、酵母抽出液、バクテラジン、ラクトアルブミン加水分解物、その他細胞成長因子などを添加したものの中で培養し、次により得られた細胞培養物から次のようにして得られる。

【0019】つまり、上記のようにして得られた細胞培養物から栄養培地を除去し、ついで細胞を生理的な塩

水、有機塩などで緩衝化された溶液などで、必要に応じ EDTA などのキレート化剤を添加したもので洗浄する。こうして単離・収獲された細胞を、代表的には EDTA などのキレート化剤及びポリオキシエチレンエーテル（代表的なものは、0.5%の Triton X-100 などの商品名で入手しうる）などの非イオン界面活性剤を含む有機塩などで緩衝化された溶液、例えば 1mM の EDTA 及び 0.5% の Triton X-100 を含む有機塩緩衝化溶液、あるいはデオキシコール酸塩を含む有機塩などで緩衝化された溶液でもって溶菌処理し、こうして得られた細胞ザイレートを、必要に応じ、例えば約 10～15 分間インキュベーション処理し、つぎに遠心処理、例えば約 1,000×20,000×g、耐ましくは約 2,000×10,000×g で、約 5～60 分間、好ましくは約 10～30 分間遠心処理し、HAV 抽出物を得ることができる。このように、細胞ザイレートからその核由来物質、細胞オルガネラ、破砕物などを遠心分離処理して除き、HAV 抽出物が得られている。HAV 抽出物は、例えば米岡特許明細書第 4,721,675 号に記載のようにも得られる。HAV 抽出物は、必要に応じ、例えばクロロホルム抽出法、酢素処理法、蔗糖濃度勾配遠心分離法などでさらに精製することもできる。

【0020】こうして得られた HAV 抽出物は、つぎに公知の方法又はそれを修飾した方法によりその感染性を不活性化するための処理がなされる。不活性化処理は、例えばホルマリン液で処理する、例えば約 37℃ で約 2.5～4.5% ホルマリン溶液の約 1:3000～1:7000 希釈下、例えば、1:4000 希釈下にインキュベーション処理することにより行うことができるが、その最適な方法を公知のものの中から選んで適用することが出来る。この処理は、例えば、2週間行うこともでき、さらにそれより短い時間あるいは長い時間でもよい。この処理の際の処理液においては、必要に応じ、緩衝剤、希釈液又は希釈剤、キレート化剤、保存剤などを添加して用いることもできる。

【0021】緩衝剤、希釈液又は希釈剤としては、水、リン酸緩衝液、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（Tris）緩衝液、生理食塩水などの塩化ナトリウム塩、N-（2-ヒドロキシエチル）ピペラジン-N'-（2-エタンスルホン酸）（HEPES）液、ピペラジン-N, N'-ビス（2-エタンスルホン酸）（PIPES）液、3-（シアノヘキシルアミノ）-1-プロパンスルホン酸（CAPS）液、3-（モルホリノ）プロパンスルホン酸（MOPS）液、アミノ酸液などが挙げられる。これらは単独でも、任意に組合わせて配合しても用いることができる。キレート化剤としては、エチレンジアミン四酢酸（EDTA）、エチレンジアミン四酢酸（EGTA）などが挙げられ

る。

【0022】本発明によれば、こうして得られた感染性不活性化された HAV 抽出物は、それをそのまま HAV 抗原として用いることもできるし、さらにそれをつぎに界面活性剤で処理し得られたものも用いることができ、こうした界面活性剤処理 HAV 抽出物は好ましいものとして使用できる。界面活性剤としては、適切なものを公知又は市販のものの中から選んで用いることができ、特にアニオン性界面活性剤が適している。

【0023】アニオン性界面活性剤としては、ステアリン酸カリウムなどの炭素数 12～18 の高級脂肪酸のアルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩、胆汁酸のアルカリ金属塩、炭素数 12～18 の高級脂肪酸のトリエタノールアミンなどの有機塩基塩、ドデシル硫酸ナトリウム（LDS）、ドデシル硫酸ナトリウム（SDS）などの炭素数 12～18 の高級脂肪酸又は高級アルコールの硫酸エステル、アルキルスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアルキルアリールスルホン酸塩などが挙げられ、特に LDS、SDS は著効を示す。アルカリ金属としては、ナトリウム、カリウム、リチウムなど、アルカリ土類金属としては、カルシウム、マグネシウムなどが挙げられる。これら界面活性剤は、共存する蛋白質の塩に依り、その使用量を濃度が好ましく、例えば約 0.01% v/v～約 10% v/v の範囲で用いることができる。特に好ましくは LDS を用い、約 0.5% v/v～約 5% v/v、又は SDS を用い、約 0.5% v/v～約 5% v/v、又はそれより低くは共存する他の蛋白質が存在しない場合には約 0.5% v/v～約 1.0% v/v の範囲で用いることができる。

【0024】界面活性剤で HAV 抽出物を処理するにあたっては、必要に応じ HAV 抽出物を緩衝剤、希釈液又は希釈剤などで希釈し、所要濃度を与える界面活性剤溶液と混合するか、懸濁する。こうして得られた混合物は、必要に応じ攪拌処理されることができる。また場合によっては、混合物中にガラスビーズなどを加えて攪拌処理してもよい。攪拌処理は、測定濃度を改善しうるものであれば、例えば攪拌混合であることもできる。処理温度は、室温で行うこともできるし、希釈下で行うこともできるし、37℃ あるいはそれ以上の温度とすることも測定感度を改善しうるものであれば、採用できる。界面活性剤で処理された HAV 抽出物は、そのまま次の処理に使用できるし、あるいは一旦保存したのち次の処理に使用できるし、また必要に応じ遠心分離などの分離処理をし、さらに必要に応じ炭素などの処理をして、次の処理に使用できる。これらの処理は、測定時の非特異吸着を抑制し、感度を改善するように用いることができる。

【0025】本発明の界面活性剤処理の際の処理液においては、緩衝剤、希釈液又は希釈剤、キレート化剤、保存剤などを添加して用いることができる。緩衝剤、希釈

液又は希釈剤としては、水、リン酸又はリン酸緩衝液、TBS緩衝液、例えば生理食塩水などの塩化ナトリウム液、HEPES液、PIPES液、CAPS液、MOPS液、N-トリス（2-ヒドロキシエチル）-2-アミノエタンスルホン酸（BES）液、N-トリス（ヒドロキシメチル）メチル-2-アミノエタンスルホン酸（TES）液、N-（2-アセトアミド）-2-アミノエタンスルホン酸（ACES）液、アミノ酸液などが挙げられる。これらは単独でも、任意に組み合わせで配合して用いることができる。キレート剤としては、EDTA、EGTAなどが挙げられる。

【0026】本発明によれば、HAV抽出物は、必要に応じて、その感染性を不活性化する前に上記界面活性剤で処理し、つぎに得られた界面活性剤で処理されたHAVを、公知の方法又はそれを修飾した方法により不活性化処理してもよい。不活性化処理は、上記と同様にしてよく、例えば約37℃で約3%ホウマリン溶液の1:4000希釈下にインキュベーション処理することにより行うことができる。

【0027】より具体的な態様において、本発明で用いられるHAV抗原試薬は、イン・ビトロの細胞培養法で得られた細胞ライゼイトから得られたHAV抽出物を約0.5%v/v〜約1.0%v/vの範囲の濃度のドデシル硫酸ナトリウム（SDS）液と混合し、つぎに必要なに応じて、例えば室温で3時間インキュベーション処理し、SDS処理HAV抽出物を得ることによって提供されるものであることもできる。本発明では、少なくともI g MまたはI g M含有水溶液処理工程と組合せ、その該得られたSDS処理HAV抽出物を用いた試料中のHAV抗体の免疫測定試験及びそれを用いた試料中の抗体の測定法も提供される。抗原試薬は、ウイルス培養物から得ることもできる、遺伝子換換の手法を用い、大腸菌、酵母などでも発現させた組換え抗原であることもできる。

【0028】本発明において試料中の特異的I g M抗体を測定するにあたっては、抗I g M抗体は、必要に応じて、例えば、寒天、アガロース、架橋アガロース、架橋アルギン酸、セルロース、ニトロセルロースやカルボキシセルロースなどのセルロースエステルあるいは混合セルロースエステル、肌、デキストラン、ゼラチン、架橋ゼラチン、キチン、コラーゲン、綿などの生体由来高分子あるいは天然物由来高分子、ポリスチレン、スチレン-ブタジエン共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルアルコール、スチレン-メタクリレート共重合体、ポリグリシジルメタクリレート、アクリロレイン-エチレンジアミルメタクリレート共重合体、ポリメタクリレート、ポリアクリルアミドなどのアクリル樹脂、イオン交換樹脂、光架橋樹脂、ポリエステル、ポリアミド、ポリアセナルなどの合成高分子、膜脂などの天然あるいは合成

の修飾あるいは非修飾の重合炭水化物、重合炭化水素など、それらの架橋誘導体など、ガラス、例えば活性化ガラスなど、シリカゲル、アルミナ、シリカ-アルミナ、硫酸バリウム、セラミック、カーボン、硫酸マグネシウムなどの無機質材料などからなる微粒子、ビーズ、マイクロプレート、マイクロタイティングウェル、マイクロチューブ、ストリップ、メンブレン、トレイ、ゲルなど、さらには赤血球、ゴム、ラテックス粒子、乳糖などの膜面に固定しておき、この固相を、分析対象としての特異的I g M抗体を含有する試料と接触させ、こうして固定化された抗I g M抗体と、分析試料中の特異的I g M抗体とを特異的に結合反応せしめ、この固定化された抗I g M抗体に結合した特異的I g M抗体を検知することにより行うことができる。

【0029】好ましい態様において、本発明では試料と反応せしめられる抗ヒトI g M抗体結合固相としては、ポリスチレン製のビーズ、ポリスチレン製の微小粒子などを用いることができる。また、抗体としては、ヒトI g Mに対する抗体であれば特に限定されることなく用いることができる。抗体は常法により得ることができ、例えば村松繁、他編、実験生物学講座14、免疫生物学、丸善株式会社、昭和60年、日本生化学会編、経生化学実験講座5、免疫生化学研究法、東京化学同人、1986年、日本生化学会編、新生化学実験講座12、分子免疫学111、抗原・抗体・補体、東京化学同人、1992年などに記載の方法に準じて、例えばマウス、ウシ、ヒツジ、ウサギ、ヤギ、ラット、マウスなどを免疫することによって得たり、モノクローナル抗体であることもでき、これらは単独でもあるいはこれらを組合せて用いることは任意にできる。これら抗体は、必要なら、ペプシン、ババインなどの酵素で消化して、F(ab')₂、Fabとして使用してもよい。抗ヒトI g M抗体としては、好ましくはα鎖に対して特異的に反応する抗体、抗β鎖抗体が挙げられ、これらはマウスミエロマ細胞を用いて細胞融合技術を利用して得られたモノクローナル抗体であってもよいとはいうまでもない。対象抗原に対する抗体の場合も上記と同様に調製したり、固定化したり、修飾したり、精製したり、モノクローナル抗体を作成したりすることができる。

【0030】ラジオイムノアッセイ、酵素免疫測定法、蛍光免疫測定法、化学発光免疫測定法などでは、¹²⁵I、³Hなどの放射性物質、西洋芹ヒドロキシダーゼ、β-D-ガラクトシダーゼ、アルカリフォスファターゼなどの酵素、フルオレセインなどの蛍光色素、アクリジニウムエステル類などの化学発光色素、金コロイド、セレンウムコロイドあるいは有色ラテックス粒子などの有色物質などで標識された抗原あるいは抗体が試薬として用いられ、分析試料中の抗体あるいは抗原を直接あるいは間接に結合反応せしめ、その放射活性、酵素活性、化学発光あるいは色の有無などを測定して、

試料中の抗体等が存在していたかを判断することができる。本発明においては、特に化学発光標識法、例えばアクリジニウムエステル類あるいは蛍光標識法、例えばフルオレセセンスなどで標識された抗体試薬を用いる化学発光あるいは蛍光免疫測定法は自動化された測定ができやすい方法である。特にアクリジニウムエステル類で標識された抗体試薬を用いる化学発光免疫測定法は自動化された測定ができやすい。

【0031】アクリジニウムエステル類としては、例えば特開昭62-35598号公報、特開昭62-61969号公報、特開昭63-57573号公報、特開昭63-101368号公報、特開昭63-112564号公報、特開平1-199499号公報、特開平1-26141号公報、特開平2-96567号公報、特開平2-133469号公報、特開平2-503268号公報、特開平2-501772号公報、欧州特許公開出願第0082686号、英国特許明細書第1,461,877号、米国特許明細書第3,539,574号などに記載のN-アルキル又はアリールアクリジニウム-9-カルボキシルエステルなどが挙げられる。

【0032】特に、特開昭63-112564号公報、米国特許明細書第3,539,574号などに記載のN-アルキル-N-アルキル又はアリール-スルホニル-N-アルキル又はアリール-スルホニルアクリジニウム-9-カルボキシル、N-メチルアクリジニウム-9-カルボキシルエステルなどは代表例の場合、測定前に発色試薬処理、例えば過酸化水素、例えば約0.01%～約0.1%の過酸化水素水溶液、及び水酸化ナトリウム、例えば約0.05N～約0.5Nの水酸化ナトリウム水溶液で処理してから、ルミノメーターなどを用いて測定を行うことができる。

【0033】勿論、標識剤は上記のものに限定されることなく、測定に使用される機器、場所などを考慮し、適宜当該分野で使用することが知られているものの中から目的に応じ選択して用いることができる。

【0034】固相あるいは膜相などと抗原あるいは抗体などを結合あるいは吸着させるには、当該分野で熟知されている方法を用いることができ、例えばイオン相互作用、疎水相互作用、共有結合などの物理的吸着や化学的結合により行うことができる。例えば、架橋剤としては、グルタルアルデヒド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド、N,N'-オ-フェニレンジマレイミド、N-スクシンイミジル-3-((2-ビリジルチオ)プロポネート、N-スクシンイミジル-S-アセチルメルカプトアセテート、N-スクシンイミジル-4-((N-マレイミドメチル)シクロヘキサン-1-カルボキシレート、N-スクシンイミジル-4-ヨードアセチルアミノペンゾート、N-スク

シンイミジル-3-(p-ヒドロキシフェニル)プロピオンレート、N-スクシンイミジル-m-マレイミドペンゾート、N-スクシンイミジル-4-マレイミドプロチレート、N-スクシンイミジル-(p-マレイミドフェニル)アセテート、N-スクシンイミジル-4-((p-マレイミドフェニル)ブチレートなどが挙げられる。

【0035】本発明の測定系においては、前記以外の界面活性剤、緩衝剤、希釈液又は希釈剤、ブロッキング剤、キレート化剤、保存剤などを含有させるようにして用いることができる。界面活性剤としては、ポリオキシエチレンソルビトン(代表的なものは、Tween 20などの商品名で入手する)、ポリオキシエチレンエーテル(代表的なものは、Triton X-100などの商品名で入手する)、オクテチルフェノール、エチレンオキサイド縮合物(代表的なものは、Nonidet P-40などの商品名で入手する)などが挙げられる。緩衝剤、希釈液又は希釈剤としては、上記のような水、リン酸緩衝液、Tris緩衝液、生理食塩水など、HEPES液、PBES液、CAPS液、MOPS液、アミノ酸液などが挙げられる。これらは単独でも、任意に配合しても用いることができる。キレート化剤としては、EDTA、EGTAなどが挙げられる。

【0036】保存剤としては、例えばナトリウムアジド、エチルパラベンなどが挙げられる。その他、本発明の測定系には、各種動物の血清、例えばウシ血清、ウシ血清アルブミン(BSA)、ウシ胎児血清(FCS)、ヤギ血清、卵白アルブミン、ゼラチン、各種乳蛋白質、例えばスキムミルク、カゼイン、カゼイン分解物、ホモ-蛋白質など、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドンなどからなる群から選ばれたものも添加することができる。

【0037】本発明においては、試薬は単一の容器あるいは複数の容器に入れてあり、使用にあたり配合されて用いようになっているものもよい。IgM抗体測定の代表的なHAV感染診断のための測定系より具体的な態様においては、本発明は、試料を適当な濃度に生理食塩水などで希釈し、例えば約80～120倍、好ましくは約100倍に希釈し、ついで適当な量の牛血清アルブミン液で安定化されたヒトIgM溶液及び抗ヒトIgM抗体結合固相担体あるいは粒子状担体などを反応させ、次に(1)HAV感染培養細胞から回収されたHAV抽出物又は(2)このHAV抽出物を少なくとも界面活性剤、例えばSDSで処理して得られたHAV抗原と免疫学的に反応させ、得られた反応生成物を化学発光標識抗HAV抗体、例えばアクリジニウム標識抗HAV抗体を免疫学的に反応させ、過酸化水素水溶液及び水酸化ナトリウム溶液からなるトリガー試薬と反応させた後検出を行うことを特徴とするHAV抗体の測定法が提供される。

【0038】本発明においては、特異的IgM抗体を測定する公知の免疫学的測定法にそれを拘束可能であり、

例えば、ウイルス感染、病原性微生物感染などにより生ずる特異抗体測定系に応用できると考えられる。ウイルスとしては、単純ヘルペス、水痘ウイルス、ムンプス、麻疹、風疹、AIDSウイルス(HIV)、A型肝炎ウイルス(HAV)、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)などが挙げられ、病原性微生物などとしては、痢疾菌(*Shigella dysenteriae*)、百日咳菌(*Bordetella pertussis*)などが挙げられる。

【0039】

【実施例】次に実施例を示して、本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこの具体例により限定されるものでなく、その思想に従うかぎり各種の形態で実施できることは理解されるべきである。

実施例1

牛血清アルブミン液で安定化されたIgMの調製

市販のヒトIgM溶液(米国ケミコン・インターナショナル社製[Chemicon International, USA.])を1%の牛血清アルブミンを含有し、0.9%塩化ナトリウム及び0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.01Mのトリス(Tris)塩酸緩衝液(pH8.5)中に希釈した(75μg/ml IgM)。得られた牛血清アルブミン液で安定化されたIgM液を4℃で様々な時間保存後希釈用ヒトIgM試薬として用いた。

【0040】抗ヒトμ-IgM抗体被覆微粒子の調製
ヤギから得られたヒトIgMのμ鎖に対して特異性をもボリクローナル抗体(米国ジャクソン・イムノ・リサーチ・ラボ社製[Jackson ImmunoResearch Lab., USA.])をカルボキシル化ポリスチレンラテックス微粒子(米国セラダイン社製[Seradyn, USA.]; 0.2μm)に以下に記載の方法で結合した。まず、0.015MのMES(2-[(N-エチルホリノ)エタンスルホン酸]緩衝液(pH4.7)中の1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド(EDAC; 16mg/ml)を用いてボリクローナル抗体ヒトIgM抗体(160mg/ml)を室温で1.5時間かけて結合した。次に1%ツween(20)及び0.9%NaClを含有する0.05Mのリン酸緩衝液(pH7.2)を用いて洗浄した。最終的には、0.05%ゼラチン、0.1%ツween20、0.9%NaCl及び0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.01Mのトリス(Tris)緩衝液(pH7.4)中に貯蔵した。被覆微粒子の固形分の%が、0.0625%になるように貯蔵バッファーで希釈し、抗ヒトμ-IgM抗体被覆微粒子試薬とした。

【0041】アクリジニウム標識抗HAV抗体の調製
γ-アミノアクリジニウム(1mg)を無水メチルホルムアミド(DMF)(100μl)中に溶解し、N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)(5.75mg

/ml、50μl)及びEDAC(9.8mg/ml、50μl)を連続して添加し、暗所、25℃で48時間攪拌することにより活性化した。プロザインA精製モノクローナル抗HAV抗体(1mg/ml)を含有している、0.9%NaCl及び0.5%CHAPSを含む0.1Mのリン酸緩衝液(pH8.0)に活性化アクリジニウムを加え(抗体の4倍のモル数)、反応混合物を室温で10分間攪拌した。緩衝液を0.1%CHAPS、0.1%アジ化ナトリウム及び0.9%NaClを含有する0.01Mのリン酸緩衝液(pH6.3)に置き換えた後、調整物を速心分離にかけ、上清を置換液のもと同じ緩衝液で平衡化したバイオウル SEC 250(米国バイオアド社製[Bioad, USA.])のHPLCカラム上のクロマトグラフィーにかけた。それぞれのフラクション(1ml)を369nm及び280nmでの紫外分光分析により分析し、アクリジニウムの結合量を決定した。結合体を濃縮フラクション(約100μg/ml)中、約4℃で貯蔵し、使用前に1%カゼインナトリウム、0.1%ツween20、0.1%アジ化ナトリウム、5mM EDTA及び0.9%NaClを含有する0.05Mのリン酸緩衝液(pH6.3)で希釈し、アクリジニウム標識抗HAV抗体試薬とした。

【0042】HAV抗原の調製

HAVは栄養培地中のバースーアレキサンダー細胞(Baerth-Alexander Cells)を用いて培養した。培養細胞に、0.5%トズイトン(Triton)X-100を含有しかつ5mM EDTA及び0.9%NaClを含む0.02Mリン酸緩衝液(pH7.2)を混合し、36℃で16~68時間攪拌した後、速心分離にかけ、上清を捨てることにより、HAV抽出物をホルムアルデヒド希釈倍率で1:4000となるように添加した後、36℃で3日間攪拌して、HAVの感染性を不活性化した。不活性化したHAV抽出物は、1%牛血清アルブミン、0.5%ツween20、0.1%アジ化ナトリウム、5mM EDTA及び0.9%NaClを含有する0.01Mのリン酸緩衝液(pH7.2)で希釈し、HAV抗原試薬とした。HAV抗原試薬は使用時まで4℃で貯蔵した。

【0043】アッセイ

1gM型HAV抗体陽性パネル試料を生理食塩水で希釈した。4℃で様々な時間保存した牛血清アルブミン液で安定化されたIgM試薬(30μl)を用いて希釈試料をさらに5倍に希釈した。比較として1gM型HAV抗体陰性パネル試料を生理食塩水で希釈した後に、牛血清アルブミン液を非添加1gM含有緩衝液(それぞれ0.01Mのトリス緩衝液生理食塩液(pH8.5)、0.01Mのトリス緩衝液(pH8.5)、0.01Mのトリス緩衝液(pH8.5)、0.01Mのトリス緩衝液(pH7.2))を用いてさらに5倍に希釈した。希釈した

試料 (125 μ l) を容器に入れ、これに抗ヒト μ -1 gM 抗体被覆微粒子試薬 (30 μ l) を添加し、37℃で20分間反応させた。反応した微粒子をガラス繊維フィルターで捕捉し、0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (300 μ l) で2回洗浄した。次にHAV抗原試薬 (30 μ l) をフィルター表面に添加し、37℃で20分間フィルター表面に捕捉されている微粒子と反応させた。フィルターを0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (100 μ l) で1回、そして同緩衝液 (300 μ l) で1回洗浄した。次にアクリジニウム標識抗HAV抗体試薬 (30 μ l) をフィルター表面に添加し、37℃で10分間フィルター表面に捕捉されている微粒子と反応させた。フィルターを0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (100 μ l) で1回、そして同緩衝液 (300 μ l) で1回洗浄した。

【0044】このフィルターを化学発光読取り機に移し、この中で0.25NのNaOH中の0.4%過酸化水素を含む発光溶液 (50 μ l) をフィルターに送り込んだ。微粒子に結合したアクリジニウムが発光し、生じた光の量を測定した。結果を図1に示す。牛血清アルブミン液に添加した1gM試薬では、保存時間の経過と共に1gM分子の凝集による発光量 (光子カウント) の増加が観察されるが、牛血清アルブミン液で安定化された1gM試薬では、保存時間の経過によっても発光量 (光子カウント) の増加は実質的にない。

【0045】実施例2

SDS処理したHAV抗原の調製

HAVは栄養増地中のバーサーアレキサンダー細胞 (Barth-Alexander Cells) を用いて培養した。培養細胞に、0.5%トライトン (Triton) X-100を含むかつ5mM EDTA及び0.9%NaClを含む0.02Mリン酸緩衝液 (pH7.2) を混合し、36℃で16~68時間攪拌した後、遠心分離にかけ、上清を捨てることにより、HAV抽出物をホルムアルデヒド希釈倍率で1:4000となるように添加した後、36℃で3日間攪拌して、HAVの感染性を不活性化した。不活性化したHAV抽出物にSDSを添加し、室温で24時間攪拌して、SDS処理HAV抽出物を得た。SDSは1.2wt%までの各種濃度となるようにして添加した。SDS処理HAV抽出物は、0.1%のアジ化ナトリウム、5mM EDTA及び0.9%NaClを含む0.01Mリン酸緩衝液 (pH7.2) で希釈して、SDS処理HAV抗原試薬とした。SDS処理HAV抗原試薬は使用時まで4℃で貯蔵した。

【0046】アッセイ

実施例1と同様にして、HAV-M陽性パネル試料を生理食塩水で希釈した。希釈試料を牛血清アルブミン液で安定化された1gM試薬 (30 μ l) を用いてさらに5倍に希釈した。比較としてHAV-M陰性パネル試料を

生理食塩水で希釈した後に、牛血清アルブミン液に希釈した1gM試薬を用いてさらに5倍に希釈した。希釈した試料 (125 μ l) を容器に入れ、これに抗ヒト μ -1 gM抗体被覆微粒子試薬 (30 μ l) を添加し、37℃で20分間反応させた。反応した微粒子をガラス繊維フィルターで捕捉し、0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (300 μ l) で2回洗浄した。次にSDS処理HAV抗原試薬 (30 μ l) をフィルター表面に添加し、37℃で20分間フィルター表面に捕捉されている微粒子と反応させた。フィルターを0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (100 μ l) で1回、そして同緩衝液 (300 μ l) で1回洗浄した。次にアクリジニウム標識抗HAV抗体試薬 (30 μ l) をフィルター表面に添加し、37℃で10分間フィルター表面に捕捉されている微粒子と反応させた。フィルターを0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (100 μ l) で1回、そして同緩衝液 (300 μ l) で1回洗浄した。このフィルターを化学発光読取り機に移し、この中で0.25NのNaOH中の0.4%過酸化水素を含む発光溶液 (50 μ l) をフィルターに送り込んだ。微粒子に結合したアクリジニウムが発光し、生じた光の量を測定した。実施例1と同様な結果が得られた。

【0047】実施例3

実施例1と同様にして、HAV-M陽性パネル試料を生理食塩水で希釈した。希釈試料を種々の濃度の牛血清アルブミン液で安定化された1gM試薬を用いてさらに希釈した。比較としてHAV-M陰性パネル試料を生理食塩水で希釈した後に、牛血清アルブミン液に希釈した1gM試薬を用いて希釈した。希釈した試料 (125 μ l) を容器に入れ、これに抗ヒト μ -1 gM抗体被覆微粒子試薬 (30 μ l) を添加し、37℃で20分間反応させた。反応した微粒子をガラス繊維フィルターで捕捉し、0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (300 μ l) で2回洗浄した。次にSDS処理HAV抗原試薬 (30 μ l) をフィルター表面に添加し、37℃で20分間フィルター表面に捕捉されている微粒子と反応させた。フィルターを0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (100 μ l) で1回、そして同緩衝液 (300 μ l) で1回洗浄した。次にアクリジニウム標識抗HAV抗体試薬 (30 μ l) をフィルター表面に添加し、37℃で10分間フィルター表面に捕捉されている微粒子と反応させた。フィルターを0.1Mのホウ酸緩衝液 (pH8.5) (100 μ l) で1回、そして同緩衝液 (300 μ l) で1回洗浄した。

【0048】このフィルターを化学発光読取り機に移し、この中で0.25NのNaOH中の0.4%過酸化水素を含む発光溶液 (50 μ l) をフィルターに送り込んだ。微粒子に結合したアクリジニウムが発光し、生じた光の量を測定した。牛血清アルブミン液で安定化されたヒト1gM含有液で希釈することにより、より少量の

1 g M含有液の使用で効果が得られることが判明した。こうした測定系において、牛血清アルブミン液で安定化された1 g M試薬は保存性、利便性が得られることがわかる。免疫学的測定における試薬として、このように優れた性状を示すことは予想外のことである。

【0049】

【発明の効果】試料中の1 g M抗体の測定において、希釈液量の削減を回避し、必要な測定範囲を得ると共により優れた測定を行うため、被検試料を少なくとも牛血清アルブミン液で安定化された1 g Mまたは1 g M含有水溶液により希釈することで、安定した、さらに自動化に有利な広範囲の測定系を組み立てることが可能となった。牛血清アルブミン液で安定化された1 g Mまたは1

g M含有水溶液は、保存安定性に優れ、簡便に利用できる、さらに牛血清アルブミン液非添加1 g Mよりも大きな効果をもたらす。1 g M含有水溶液試薬は、測定の度毎に希釈したり、調整したりする必要がなくなり、一旦調整された1 g M含有水溶液は再度測定に利用できる。牛血清アルブミンは、大量且つ安定して入手できるので、安価な免疫学的測定用1 g M試薬を得ることが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 種々の時間保存した後の牛血清アルブミン液で安定化された1 g M希釈液で希釈された場合と牛血清アルブミン液非添加1 g M希釈液で希釈された場合との免疫測定での発光量における関係を示す。

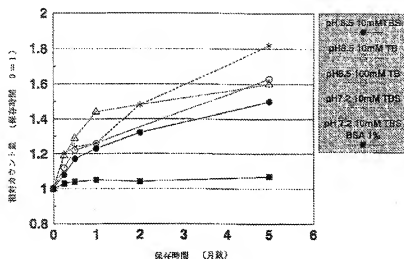


図1 免疫測定における1 g Mの経時安定性試験の結果